

# Home4


## Model: LX7




### Medisch

#### Kenmerken:

- Eenvoudige drukinstelling van 20 tot 200 mmHg ( 26,7 ... 267 hPa) uit te voeren in stappen van 20 mmHg.
- Drukverdeling over het manchet is gelijk aan de drukverdeling in een Therapeutisch Elastische Kous. De druk in de kamer die de voet omsluit, heeft altijd de hoogste druk, hierdoor kan de voet nooit „vollopen”.
- Oedeembehandeling mag direct gestart worden tot en met een druk van 60 mmHg, zonder gewenning.
- Diverse behandelingsmogelijkheden door kamers aan of uit te zetten.
- Veilige behandeling door volledig automatische, geoptimaliseerde opstart.
- Standaard behandelzeiten van 10, 20 of 30 minuten.
- Mogelijkheid tot gelijktijdige behandeling met drie manchetten.

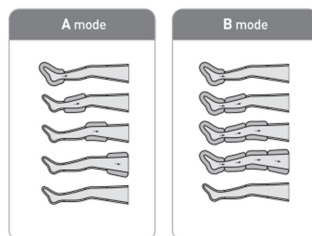

- Allergeen vrije manchetten, geschikt voor ieder huidtype.
- Standaard levering is inclusief twee easy-connect beenmanchetten, 2 voetpads en 1 slangaansluiting.
- Extra verkrijgbaar:
  - Arm manchet,
  - Middel manchet,
  - Broek manchet,
  - extra ritsen; enkele slang en een verdeelslang.
- Twee verschillende behandelingen mogelijk, te weten:
  - Mode A: Massage
  - Mode B: Circulatie & Drainage

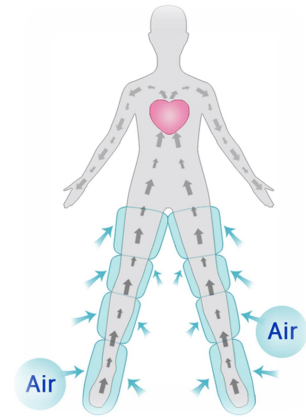

## Indicaties:

Behandelmogelijkheden DL2003V3 en:

- Lymfoedeem (zowel primair als secundair)
- Lipoedeem
- Tijdelijk oedeem na operatie of ongeval
- Aderaandoeningen, zoals spataders, etalagebenen
- Trombose preventie na vaatoperaties
- Verlichting van Poly-Neuropathie
- Motorische beperking door halfzijdige verlamming

## Contra-Indicaties:

- Acute necrose
- Acute Diep Veneuze Trombose (DVT)
- Zware niet ingestelde Hypertonie (Bloeddruk)
- Acute ontstekingen, bijv wondroos
- Hartfalen e.d.
- Oedeem door medicatie (overleg dan eerst met uw arts voor alternatieve medicatie)

## Doelgroep:

De LX7 is bedoeld voor patiënten, die onder medisch toezicht met regelmatige controle van een arts of therapeut, aan zelfmanagement doen, teneinde de zelfredzaamheid te bevorderen.

## Wat doet het:

Het apparaat stimuleert het lymfesysteem en het bloedcirculatiesysteem door benen, armen en / of heupen / buik met lucht gevulde manchetten te masseren. Het op gang brengen van de afvoer van lymfevocht zorgt voor een vermindering van opeenhoping van vocht in een arm of been. Door de verbetering van de circulatie van bloed en afvoer van lymfe vocht wordt tevens het immuunsysteem verbeterd, waardoor men minder vatbaar wordt voor allerlei ziektes.

## Wie zijn wij:

Doctor Life is een geregistreerd handelsmerk van Daesung Maref Corp. Ltd uit Zuid-Korea. Zij maken lucht gedreven massage-(IPC-) apparatuur voor medische behandelingen, sportmassage en wellness toepassingen. North Sea Health Care is officieel importeur van Doctor Life apparatuur.

## Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

**North Sea Health Care BV**

Maarnse Grindweg 22

3951LK Maarn

Tel: 06 22906310

E-mail: [info@doctorlife.nl](mailto:info@doctorlife.nl) en bezoek onze website op [www.doctorlife.nl](http://www.doctorlife.nl)